

INSTRUCTION MANUAL

ELOFLEX R

BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING

OHJEKIRJA

MANUALE DI ISTRUZIONI

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

Velkommen til din Eloflex

Takk for at du har valgt Eloflex som din elektriske rullestol. Vi er glade for at du har valgt Eloflex, for vår misjon er å forenkle hverdagen og øke friheten for mennesker med bevegelsesutfordringer.

Vi håper at du får glede av begge deler med din Eloflex, og at det skal være en god opplevelse å bruke din nye elektriske rullestol.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom hele dokumentet før du bruker Eloflex for første gang.

Det anbefales også å øve på å bruke Eloflex på et stille, åpent og plant sted før du begir deg ut i andre omgivelser.

Vi er her for å støtte deg når du begynner å bruke Eloflex. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

**Lykke til og stor glede med din Eloflex.
Kjør forsiktig!**

Innhold

Tiltent bruk	3
Brett ut og brett sammen	4
Tippesikring	4
Instruksjoner for lading	5
Installere styrespaken	5
Bruke styrespaken	6
Ytterligere funksjoner	7
Manuell kjøring	7
Fotstøtte	8
Ryggstøtte	8
Løft armlenene	9
Transport og oppbevaring	9
Kjøring	10
Sikkerhet	11
Tekniske spesifikasjoner	12
Kontakt	12

Side

3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
12



Tiltenkt bruk

Klassifisering og tiltenkt bruk

Eloflex el-rullestoler er utviklet for personer som har problemer med å gå eller ikke kan gå i det hele tatt, men som har syn, fysiske og mentale evner til å kontrollere en el-rullestol.

Eloflex el-rullestol er tilstrekkelig kompakt og fleksibel for innendørs bruk, men den er også egnet for utendørs bruk. I kapittelet "Tekniske data" bakerst i dette dokumentet finner du informasjon om hastighet, svingradius, rekkevidde, maksimal løftekapasitet, maksimal brukervekt osv.

Eloflex er testet og godkjent i henhold til EN12184:2014 - Klasse B (innendørs og utendørs bruk). Eloflex er også godkjent i henhold til ISO-7176, IEC60601, og batteriene er godkjent i henhold til UN38.3.

Eloflex elektriske rullestoler oppfyller de gjeldende kravene i MDR 2017/745.

MDR klasse 1 samsvarsvurdering/CE-merking er utstedt i henhold til artikkel 19 og vedlegg II og III i MDR 2017/745. CE-merkingen oppheves hvis du bruker erstatningskomponenter eller tilbehør som ikke er godkjent for dette produktet.

Behov

Formålet med en Eloflex elektrisk rullestol er å kompensere for en skade eller funksjonsnedsettelse, og den anbefales i følgende tilfeller:

- Hvis brukeren ikke kan gå eller har svært begrenset gangfunksjon, noe som gjør det vanskelig å bevege seg i eget hjem.
 - Hvis det er behov for å forlate hjemmet for å gå ut eller besøke steder man regelmessig oppsøker i hverdagen.
 - Når brukeren har problemer med å nå eller utføre arbeid eller aktiviteter på grunn av bevegelsehemninger.
- Det anbefales å bruke Eloflex elektriske rullestoler både innendørs og utendørs hvis det ikke er mulig å bruke håndbetjente rullestoler på grunn av bevegelsesproblemer, men det fortsatt er mulig å håndtere elektriske rullestoler på riktig måte.

Tilbehør

Lader, reflekser og en veske med enkle verktøy følger med i oppbevaringsposen under setet ved levering.

Bruksanvisning

Bruk kun Eloflex el-rullestolen når den er fullt funksjonsdyktig, ellers utsetter du deg selv og andre for fare. Følgende liste omfatter ikke alle mulige situasjoner, men beskriver visse forhold som kan påvirke el-rullestolens brukbarhet:

- Ikke bruk el-rullestolen hvis batteriene er defekte eller deformerte.
- Ikke bruk el-rullestolen hvis motoren er rykkete eller lager unormale lyder.
- Ikke bruk el-rullestolen hvis bremsefunksjonen ser ut til å være defekt.
- Hvis dekkene er slitte, må du kontakte assistansesenteret eller forhandleren.
- Hvis du oppdager skader på sikkerhetsbelte, armlener, sete, ryggstøtte, joystick eller andre deler av stolen, må du kontakte assistansesenteret eller forhandleren.
- Hvis du oppdager skader på det elektriske systemet (kabler, batterier, ladere osv.), må du kontakte assistansesenteret eller forhandleren.

Produsentens garanti

Eloflex-garantien dekker utskifting av deler som er ødelagt, forutsatt at skaden ikke er forårsaket av brukeren. Garantien dekker ikke skader som skyldes ytre omstendigheter som tyveri, misbruk, feil bruk, lynnedslag eller modifikasjoner.

Levetid

Eloflex har en estimert levetid på 5 år. Produktets levetid påvirkes imidlertid i stor grad av hvordan det brukes og vedlikeholdes. En Eloflex kan vare mye lenger hvis den blir tatt godt vare på og brukt i samsvar med informasjonen i dette dokumentet.

Sikkerhetsforskrifter og risiko


BRUKEREN MÅ LESE SIKKERHETS- OG KJØREANVISNINGENE I DETTE DOKUMENTET FØR ELOFLEX-RULLESTOLEN TAS I BRUK.

Brett ut og brett sammen

Brette ut

Trinn 1

Plasser den sammenfoldede stolen på bakken som vist til høyre. Lås opp transportlåsen på baksiden av rygglenet. Hold i rygglenet og trekk det oppover for å åpne stolen. Med den andre hånden skyver du setet nedover til du hører et tydelig «klikk», noe som indikerer at sikkerhetslåsen er innkoblet.

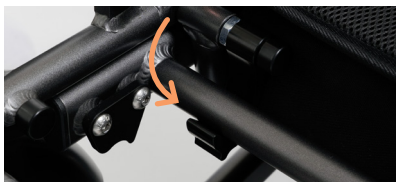

Trinn 2

Viktig! Sørg for at låsen er helt lukket for å sikre stolen i utslått posisjon.



Kontroller låsen for bruk.

Brett sammen stolen

Trinn 1

Trykk på den røde knappen for å løsne hovedlåsen som vist på bildet.

Trinn 2


Plasser den ene hånden på forsiden av seteputen. Ta tak i toppen av ryggstøtten med den andre hånden og brett den forover. Skyv stolen sammen som vist.



Klem punkter! Vær forsiktig når du bretter sammen.

Trinn 3

En praktisk transportlås kan kobles inn for å holde rullestolen i sammenfoldet stilling. Roter transportlåsen til den låser den motsatte stangen.

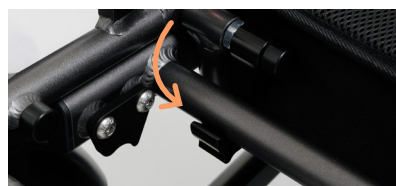

Tippesikring

Trykk på den røde knappen og brett tippesikringen oppover for å trekke den inn. Tippsikringen trenger ikke å justeres, men kan trekkes inn for transport på enkelte modeller. Rullestolen må ikke brukes uten at tippesikringen er aktivert, da dette utgjør en risiko for alvorlige personskader. Kontroller den før hver bruk.



RISIKO FOR SKADER!
Sørg alltid for at tippesikringen er aktiv.

Instruksjoner for lading

Før du begynner

- Lad din Eloflex ved levering.
- Bruk kun den originale laderen som fulgte med Eloflex.
- Laderen er kun beregnet på å kobles til styrespaken, ikke direkte til batteriene.
- Lad minst hver tredje måned for å unngå permanent skade på batteriene.

Hvordan lade

Eloflex skal lades etter hver kjøretur eller når batteriindikatoren på styrespaken viser tre streker.

Begynn med å slå av Eloflex (alle lysene på styrespaken skal være av).

Koble laderen til kontakten på forsiden av styrespaken. Sørg for at kontaktene stemmer overens.

Koble laderens strømkabel til et vegguttak. Ladingen indikeres av en lampe på laderen. Et rødt lys betyr at ladingen pågår.

Etter ca. tre timer er batteriene 90 prosent ladet, og stolen kan tas i bruk.

Etter ca. 5-8 timer lyser laderen grønt, noe som indikerer at batteriene er fulladet. Under lading vil laderen bli varm, noe som er normalt.

Koble alltid laderen fra både stikkkontakten og rullestolen når ladingen er fullført. Lad aldri uten tilsyn. Batteriene kan lades ned til 0 grader. Ved lading ved lavere temperaturer kan det hende at batteriene ikke lades helt opp.

Hvis Eloflex brukes i minusgrader, påvirkes rekkevidden. Ved for eksempel -10 grader kan rekkevidden reduseres med opptil 50 %.



Langvarig lagring

Batteriene kan bli permanent skadet hvis spenningen blir for lav. Vi anbefaler at du kobler fra batteriene for å minimere utladingen og lader dem regelmessig (minst én gang hver tredje måned).

La aldri laderen være permanent tilkoblet.



Hvis batteriene ikke lades regelmessig, kan det føre til permanent skade.

Installere styrespaken

Trinn 1

Monter styrespaken ved å montere hurtiglåsen på armlenet med låsen vendt utover. Juster mutteren slik at låsen kan lukkes helt, men likevel holder styrespaken sikkert på plass. Styrespaken kan monteres på høyre eller venstre side.



Trinn 2

Koble kabelkontaktene sammen og vri dem forsiktig til pinnene passer inn i hullene og sporene i begge kontaktene passer sammen. Skru deretter hylsene godt fast på hvert tilkoblingspunkt.



Vær forsiktig så du unngår å skade eller bøye pinnene i kontakten.

Bruke styrespaken




- 1 Hastighetsmåler:** Viser din nåværende hastighet.
- 2 Hastighetsinnstilling:** Viser hvor langt du har kjørt og den aktuelle hastigheten.
- 3 Tripp-/ODO-måler:** Viser hvor langt du har kjørt siden siste gang du slo på bilen (trip) eller den totale distansen for kjøretøyet (ODO).
- 4 Batterinivå:** Indikerer hvor mye strøm som er igjen i batteriene. Når batteriene er fulladet, er alle stolpene hvite. Det anbefales å lade når tre søyler er brukt opp.

USB-kontakt


TIPS: Bruk USB-kontakten under styrespaken til å lade mobiltelefonen.




Styrespaken: Kontrollerer stolens hastighet og retning.

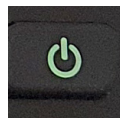

Slå på og av: Trykk for å slå Eloflex på eller av.

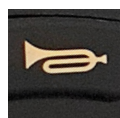

Hupe: Trykk for å varsle om oppmerksomhet.

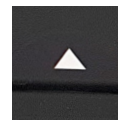

Øke hastigheten: Trykk for å få stolen til å gå raskere.



Reduser hastighet: Trykk for å få stolen til å kjøre saktere.



På/av-lys: Trykk for å slå lyset på eller av.

Ytterligere funksjoner

Justere innstillinger

Du kan endre stolens innstillinger, inkludert språk, hornvolum og måleenheter.


1. Trykk på høyre multifunksjonsknapp for å få tilgang til innstillingene. Dette viser en liste med alternativer.



2. Bruk hastighetsknappene til å bla opp og ned i listen over alternativer.



3. Velg en funksjon ved å trykke på høyre multifunksjonsknapp (Enter), eller gå ett trinn tilbake ved å trykke på venstre multifunksjonsknapp (Return).

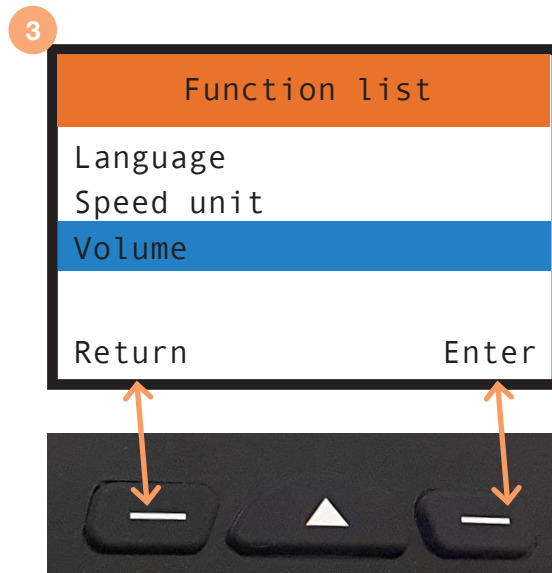

Lås / barnesikkerhet

Du kan låse Eloflex elektronisk ved å trykke på pil opp og pil ned samtidig i 3 sekunder. Et lite symbol øverst i displayet vil indikere at låsen er aktivert. (Styrespaken må være slått på for å låse/låse opp).

USB-ladeport

USB-porten kan lade mobiltelefoner, iPads og andre bærbare enheter. Den leverer 5 V strøm med ladestrømmen som bestemmes av den tilkoblede enheten, opp til maksimalt 2,1 A.

Advarsler

Displayet kan vise feilkoder for å indikere feil. Feilkode 1 og 2 indikerer at magnetbremsene er aktive.

Fjernkontroll via app

Eloflex-rullestolen kan styres via en app. Bruk QR-kodene nedenfor for å laste den ned. Kontakt forhandleren din for detaljerte instruksjoner om nødvendig. MERK: App-kontrollen skal ikke brukes som en assisterende kontrollenhet (f.eks. når en person sitter i stolen).



Manuell kjøring

Slå av den elektriske rullestolen med styrespaken. Trykk deretter på de røde spakene på motorene (se bildet) for å koble fra magnetbremsene. I denne posisjonen kan stolen ruller manuelt.

Vær oppmerksom på følgende!


Hvis brukeren bruker stolen uten assistanse, må stolens magnetlås alltid være slått på.



Ikke skyv de røde spakene med foten, bruk kun hendene.

Fotstøtte


Fotstøtten kan foldes opp og inn som vist nedenfor for å gjøre det enklere å komme inn og ut av stolen.

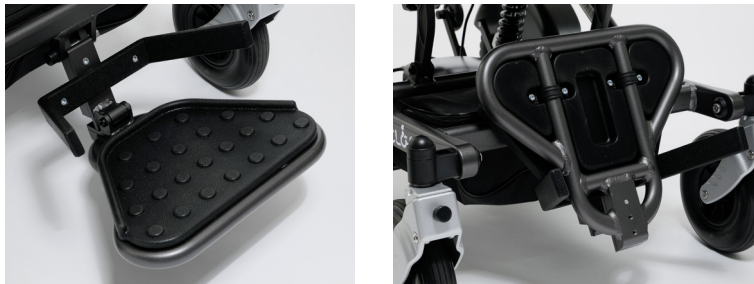

Justering av fotstøtten

Fotstøtten kan justeres vertikalt og horisontalt i faste posisjoner. Løsne bolten, flytt fotstøtten til ønsket posisjon, og stram bolten forsiktig, slik at den er på linje med det gjengede hullet. Stram til bolten.

Hvis fotstøtten ikke forblir i hevet posisjon, kan du justere fotstøttens treghet ved å stramme til festeskruene.

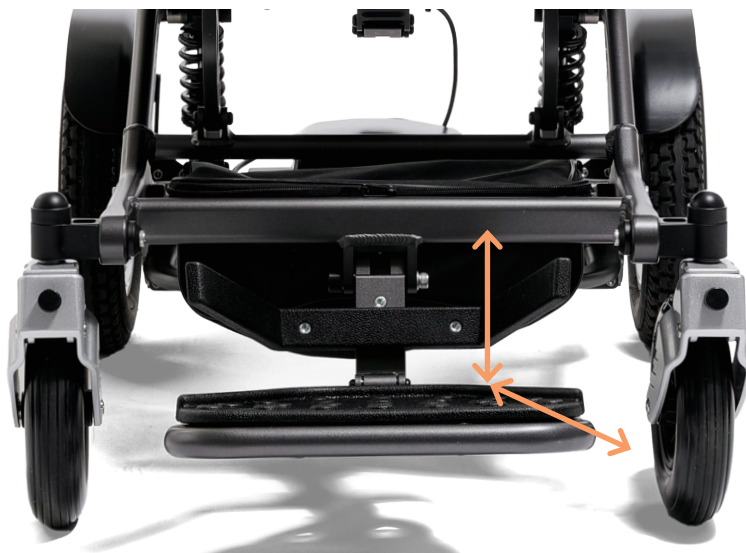

Ryggstøtte

Justere ryggstøtten


Juster ryggens helning ved å trykke ned spakene på sidene og plassere ryggstøtten i en vinkel som føles behagelig. Slipp deretter spakene for å låse posisjonen. Du kan velge mellom 8-30 graders vinkel.



Løft armlenene

For å løfte armlenet trykker du ganske enkelt på det lille røde utløserhåndtaket under armlenet.

Armlenet låses automatisk igjen når det er foldet ned.

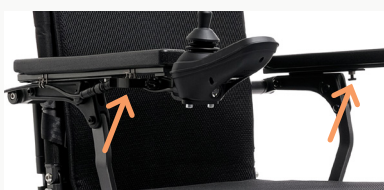

Transport og oppbevaring

- Når stolen skal løftes, anbefales det at den først brettes sammen og legges flatt, og deretter løftes opp i stående stilling før den til slutt løftes.
- En sammenfoldet stol kan legges i bagasjerommet på en bil eller settes i et kleskap.
- Fold ned eller fjern styrespaken under transport. Hvis stolen ikke skal brukes på en stund, må du sørge for at den oppbevares riktig og at batteriene lades med jevne mellomrom i henhold til kapittelet "Hvordan lade". Ellers kan stolen bli ubrukelig.
- Stolen bør oppbevares innendørs i frostfrie, tørre og ventilerte områder.

- Oppbevaringstemperatur 0-30 grader.
- Putetrekkene er avtakbare og kan vaskes ved 40 °C.
- Ved transport med buss eller handikaptransport må Eloflex festes i festepunktene som er vist på bildene nederst. **NB! Eloflex er ikke testet eller godkjent som bilstol. Det er derfor ikke tillatt å sitte i Eloflex under biltransport.**
- Ved transport med fly, vennligst bekreft med flyselskapet før både bestilling og inspeksjon. Eloflex følger anbefalingene fra IATA.



Kjøring

Les

Brukeren må lese disse sikkerhets- og kjøreinstruksene før bruk av Eloflex elektrisk rullestol.

Øvelse

Øvelse gjør mester. Tren på å kjøre Eloflex sammen med en assistent ved å starte på en åpen flate, helst utendørs, før du bruker el-rullestolen blant andre mennesker, i butikker, på restauranter osv. Kjør fremover ved å bevege styrespaken sakte fremover. Stopp ved å slippe styrespaken.

Kjør bakover

Kjør bakover ved å bevege styrespaken sakte bakover. Slipp styrespaken for å stoppe. Husk å alltid se bakover før du begynner å rygge, slik at du er sikker på at ingen personer eller gjenstander er i veien.

Spinn

Snurr ved å bevege styrespaken forsiktig sidelengs. Pass på at ingenting er i veien for sidene når du snurrer.

Sving

Sving mens du kjører ved å bevege styrespaken forsiktig sidelengs i samme retning som du ønsker å svinge. Senk alltid hastigheten når du svinger.

Hinder

Øv deg på å unngå og passere hindringer. Beveg styrespaken sidelengs mens du kjører fremover for å unngå hindringer. Husk å senke hastigheten når du nærmer deg hindringer.

Rask kjøring

Rask kjøring: Trykk styrespaken i foroverposisjon hvis du vil kjøre fort. Husk å trekke inn styrespaken og senke hastigheten så snart du føler deg usikker, enten du svinger eller nærmer deg et hinder

Kjør over hindringer

Kjør sakte frem til hindringen, og sørg for at forhjulene er i kjøreretningen. Beveg deretter styrespaken sakte forover mens du lener deg bakover for å kjøre over hindringen Eloflex er testet og godkjent for hindringer opp til maksimalt 6 cm.

Skrånende underlag

Prøv å kjøre rett opp eller ned for en skrå overflate. Len deg litt forover når du kjører opp, og bakover når du kjører ned, for å opprettholde tyngdepunktet. Unngå om mulig å kjøre sidelengs, og kompensér for en eventuell sidehelling ved å lene deg i motsatt retning. Kjør alltid sakte i skråninger, og vær oppmerksom på at bremselengden kan være betydelig større enn på plant underlag. Maksimal tillatt hellingsvinkel for denne rullestolen er 9 grader. Selv om din Eloflex er i stand til det, bør du unngå å kjøre i skråninger som er større enn den påkrevde testvinkelen på grunn av fare for alvorlig personskade i tilfelle tipping.

Heiser

Husk å sjekke bredden på heisdøren og hvor raskt døren lukkes før du går inn i heisen. Husk at du kan bli nødt til å rygge ut av heisen hvis den ikke er stor nok til at du kan snu.

Kjøring på veien

Kjør først og fremst på fortau, gang- og sykkelveier og til slutt på trafikkerte veier med din Eloflex.

Kryss veibanen

Hvis det er mulig, velger du alltid å krysse veien ved et fotgjengerfelt. Vær oppmerksom på kryssende biler. Bruk avfaset del av fortauet hvis det er tilgjengelig. Unngå fortauskanter som er høyere enn 6 cm.

Dekk

Hvis rullestolen er utstyrt med luftfylte dekk, må du jevnlig kontrollere lufttrykket ved 2,5 bar. Ved punktering må du avstå fra videre kjøring og kontakte forhandleren eller et egnet verksted for reparasjon.

Sikkerhetsinstruksjoner ved kjøring

Det er fare for alvorlig personskade hvis rullestolen tipper.

- Kjør kun i stigninger som ikke overskrider den maksimale angitte vinkelen.
- Bruk alltid tippesikring når du kjører med Eloflex
- Nedoverbakker skal alltid kjøres med lavere hastighet
- Unngå områder der det er fare for isete eller glatte overflater
- Forsøk aldri å kjøre opp eller ned trapper med din elektriske rullestol
- Kjør aldri over hindringer som er høyere enn den anbefalte maksimumshøyden
- Unngå raske bevegelser med styrespaken og plutselige endringer i kjøreretningen under kjøring

Risiko for å bli sittende fast på avsidesliggende steder.

- En bruker med sterkt nedsatt bevegelse bær ikke kjøre lengre strekninger utendørs alene

Fare for skade hvis en fot sklir av fotstøtten og faller under den elektriske rullestolen under kjøring.

- Plasser alltid føttene midt på fotstøtten under kjøring

Fjæring


Denne rullestolen er utstyrt med fjæring på alle fire hjul. Dette gir utmerket kjørekomfort og forbedret evne til å navigere jevnt over hindringer, små fortauskanter etc. Fjærene er forspent og trenger ikke å justeres.

Fare for personskade hvis du kolliderer med andre gjenstander.

- Kjør gjennom trange passasjer med lavest mulig hastighet og størst mulig oppmerksomhet
- Vær ekstra oppmerksom når du nærmer deg eller kjører i nærheten av bord på grunn av klemfare mellom bordplaten og joysticken og/eller armlenet.

Det er fare for at rullestolen kan velte hvis tippesikringen fjernes, skades eller monteres i en posisjon som avviker fra standardmonteringen.

- Tippesikringen må alltid være montert når den elektriske rullestolen brukes.
- Tippesikringen fungerer bare på fast underlag. På mykt underlag som gressplener og snø kan tippesikringen miste sin effekt. Derfor må du kjøre
- derfor svært forsiktig på mykt underlag.

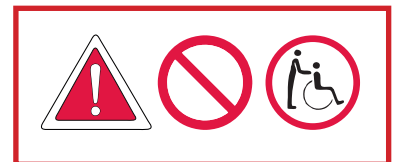

Sikkerhet

Kryssing av jernbanespor

Kryss alltid jernbanesporet rett forfra, aldri skrått fra siden. Kryss aldri jernbanesporet alene, ha alltid med deg noen som kan hjelpe deg.

Skarpe kanter

Vær forsiktig når du kjører i bratte bakker, da stolen kan brenke. Eloflex er testet og godkjent for stigninger på maksimalt 9 grader. Ha alltid med deg noen som kan hjelpe deg.

Høye kanter

Vær forsiktig når du kjører opp eller ut for en kant. Eloflex er testet og godkjent for kanter opp til maksimalt 6 cm. Ha alltid med deg noen som kan hjelpe deg.

Forflytning

Vi anbefaler at du alltid har med deg noen som kan hjelpe deg med forflytning til og fra Eloflex. Slå alltid av strømmen før du starter forflytningen. Løft alltid opp armlenene og fotstøtten før forflytning for å gjøre det lettere å komme inn og ut av stolen.

Ikke reparerer på egen hånd

Forsøk aldri å reparere en ødelagt elektrisk rullestol på egen hånd. Hvis du prøver å reparere stolen selv, gjelder ikke garantien. Henvend deg alltid til Eloflex eller til butikken eller hjelpemiddelsentralen som har solgt/forordnet stolen. Du må aldri gjøre endringer på din elektriske rullestol på egen hånd.

Ingen leketøy

La aldri barn som normalt ikke bruker el-rullestol sitte på eller bruke din Eloflex.

Rengjøring

Eloflex må aldri rengjøres med rennende vann. Tørk den kun av med en fuktig klut. Hvis Eloflex er treg til å folde seg sammen, kan du smøre leddene med olje eller silikon spray.

Vær forsiktig med varme

La aldri Eloflex stå i direkte sollys, i nærheten av en varmekilde eller åpen ild. Batteriene kan bli skadet, og enkelte overflater kan bli så varme at det

er fare for personskader. Du kan bruke din Eloflex fra -10 grader og opp til +45 grader. Ved lave temperaturer vil rekkevidden påvirkes. Rullestolen er antennelsesbestandig i henhold til EN 12184.

Oppbevaring

Oppbevar Eloflex utilgjengelig for barn når den ikke er i bruk. Stolen skal oppbevares innendørs i frostfrie, tørre og ventilerte rom. Oppbevaringstemperatur 0-30 grader.

Laderen

Laderen må aldri tildekkes når den brukes til å lade Eloflex. Laderen blir varm, og det er fare for ulykker eller personskader.

Batteriene

Batteriene må aldri oppbevares i direkte sollys eller på et sted som kan nå temperaturer under null grader. Batteriene skal oppbevares på et tørt og ventilert sted. Ved avhenging må batteriene resirkuleres i henhold til i henhold til nasjonale/lokale krav. Vær oppmerksom på at rekkevidden, i likhet med alle batteridrevne produkter, vil reduseres over tid, også i garanti perioden og i produktets levetid.

Bruk

Eloflex el-rullestol er utviklet for å dekke en rekke ulike behov. Avgjørelsen om egnethet for brukeren tas av koordinatoren eller forhandleren og brukeren i fellesskap. Eloflex kan ikke påta seg ansvar dersom el-rullestolen ikke er hensiktsmessig tilpasset brukerens behov.

Modifikasjoner

Din Eloflex skal primært brukes i standardkonfigurasjonen. Eventuelle endringer eller justeringer må kun utføres av ditt autoriserte servicesenter eller av Eloflex. Vær oppmerksom på at skader eller funksjonsfeil som skyldes endringer som ikke er i samsvar med bruksanvisningen, eller som skyldes mangelfullt vedlikehold, ikke dekkes av garantien.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Det er fare for personskade hvis den elektriske rullestolen brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette dokumentet.

- Bruk el-rullestolen kun i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen (se kapittelet "Typeklassifisering og tiltenkt bruk" ovenfor).
- Rullestolen må aldri brukes (sitte i) mens den transporteres i en annen bil/ buss.

Det er fare for personskade hvis den elektriske rullestolen brukes ved redusert kjøreevne.

- Ikke bruk rullestolen når kjøreevnen er nedsatt på grunn av f.eks. sykdom, medikamenter eller alkohol.

Det er fare for personskade hvis den elektriske rullestolen ufrivillig flyttes.

- Slå av rullestolen før du går inn og ut av den, eller hvis det er fare for at du, en annen person eller en gjenstand kan komme i kontakt med joysticken.
- Når motorene er koblet ut, fungerer ikke bremsene. Rullestolen må derfor bare skyves på flatt underlag, aldri i skråninger. Rullestolen må aldri etterlates i eller i nærheten av bakker med utkoblede motorer.

Det er fare for personskade hvis den elektriske rullestolen slås av under kjøring, f.eks. med av/på-knappen eller ved å rive av en kabel, da den stopper med et hardt rykk.

- Slipp styrespaken når du bremser i en nødsituasjon. Da stopper rullestolen automatisk.

Det er fare for personskader på grunn av fall fra rullestolen

- Ikke beveg deg fremover, ikke bøy deg fremover mellom knærne og ikke len deg over rullestolkanten, for eksempel for å nå gjenstander.
- Det anbefales at du alltid bruker sikkerhetsbeltet og justerer det før hver tur.
- Ved forflytning mellom seter/kjøretøy bør du kjøre så nær den nye posisjonen som mulig for å minimere avstanden og risikoen for at rullestolen tipper.

Det er fare for personskade hvis den maksimalt tillatte belastningen overskrides.

- Overhold den maksimalt tillatte belastningen (se kapittelet "Tekniske data" bakerst i dette dokumentet).
- El-rullestolen må kun brukes av én person. Rullestolen må aldri brukes til å transportere mer enn én person om gangen.

Det er fare for personskade og skade på rullestolen hvis låsen løsner når el-rullestolen ikke er ordentlig fastspent når den brukes.

- Hvis låsen på den elektriske rullestolen ikke har klikket ordentlig på plass, kan stolen plutselig kollapse når den brukes, noe som kan føre til at du faller ut av rullestolen.
- Kontroller alltid at låsekroken er i riktig posisjon før du bruker den elektriske rullestolen.
- Det er fare for personskade og klemskader når rullestolen foldes sammen.
- El-rullestolen må alltid klappes sammen og heves som beskrevet i bruksanvisningen.
- Vær oppmerksom på at ingen eller ingenting kommer i klem når rullestolen brettes sammen og brettes ut.

Det er fare for personskader og skader på rullestolen hvis den brukes i fuktige områder.

- El-rullestolen må ikke brukes under heiging.
- El-rullestolen må ikke brukes når du bader.
- Unngå å kjøre i regnvær over lengre tid.

EMC

- Det er fare for at rullestolen kan forstyrre, eller bli forstyrret av, utstyr på grunn av elektromagnetiske felt. Dette kan påvirke rullestolens betjening.
- Denne enheten er utstyrt med Bluetooth-sender. Kontakt forhandleren din for mer informasjon.

Tekniske spesifikasjoner **R**

Netto vekt	29 kg uten batterier
Total vekt	32,5 kg inkludert batterier
Hastighet	6,5 km/t
Rekkevidde	30 km*
Varighet	5 timer per lading
Motor	2 x børsteløs motor med høy effekt
Motoreffekt	2 x 250 watt
Batteri	2 x Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh) (+1 ekstra plass)
Batteriets vekt	1,8 kg
Ladetid	3 timer
Svingradius	88 cm
Maks. helling	9 grader statisk, 6 grader dynamisk
Hjul	8" foran (kompakte), 12" bak (luft) (2,5 bar)
Setehøyde	55 cm
Bredde på sete	43 cm
Dybde på sete	43-48 cm
Maks. brukervekt	160 kg
Joystick	Høyre- eller venstremontert
Pute	Avtakbart, avtakbart deksel
Ryggstøtte	8°- 30°
Størrelse	102,5 cm (høyde) x 62 cm (bredde) x 108,5 cm (dybde)
Størrelse sammenfoldet	44 cm (høyde) x 62 cm (bredde) x 89 (87**) cm (dybde)
Garanti	2 år
Maks. hindring	5 cm

* Avstand under optimale forhold, og vil påvirkes av temperatur, kjørestil, høyde over havet, batteritilstand osv.

** Leggstøtte fjernet

© Copyright Eloflex

Dette dokumentet inneholder opphavsrettsbeskyttet informasjon og kan ikke kopieres eller reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra Eloflex. Eloflex tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil i dette dokumentet og forbeholder seg retten til å gjøre produktendringer.

Kontakt Eloflex

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp eller trenger informasjon om produkttilbakekallinger eller sikkerhetsmeldinger, kan du kontakte ditt hjelpesenter eller din lokale forhandler. Ved behov kan du finne produktets serienummer på et klistremerke på undersiden av chassiset.



2021-05-08

Version 2.0

Sungo Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE

Amsterdam, Netherlands

SRN:NL-AR-000000247



Eloflex

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna

SWEDEN

+46 10-18 33 100

info@eloflex.eu

www.eloflex.no

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd

No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu